

# BT 90S БАКТЕРИЦИДНАЯ УСТАНОВКА С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Передвижная/Настенная  
и потолочная модели



**Ультрафиолетовая бактерицидная установка  
с вентилятором и герметичной камерой очистки**



- BT 90S эффективно очищает воздух от бактерий и грибов
- Очистка возможна в течении 24 часов в сутки
- Возможно применение во всех сферах системы здравоохранения

# BT 90S БАКТЕРИЦИДНАЯ УСТАНОВКА С ВЕНТИЛЯТОРОМ


Передвижная/ Настенная и потолочная модели

Передвижная, настенная или потолочная модели ультрафиолетовой бактерицидной установки с вентилятором для очистки и стерилизации воздуха. Корпус установки выполнен из металла с эпоксидным покрытием. УФ-излучение сосредоточено внутри корпуса.

Установка годится для применения во всех учреждениях системы здравоохранения, где необходимо соблюдение гигиенических условий, например: в лабораториях, операционных залах, в инфекционных отделениях, прачечных и кухнях больниц.

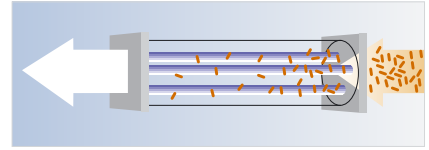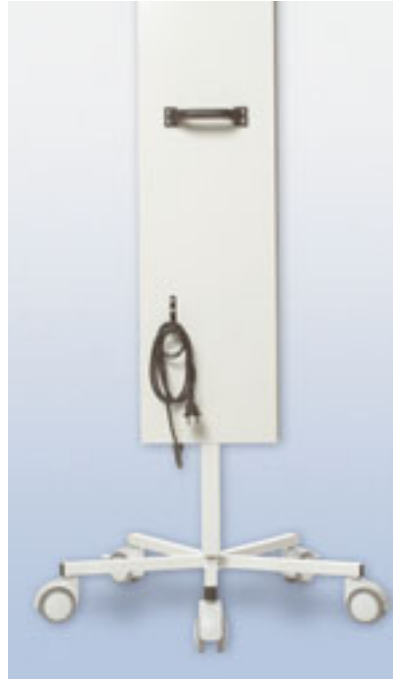

Вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха через источники УФизлучения. Очищающая камера герметична и имеет внутреннее отражение поверхности.

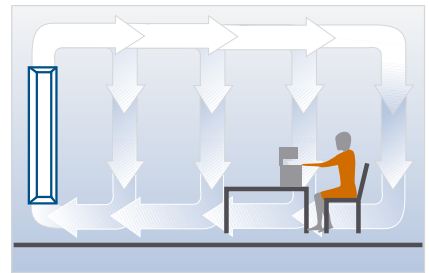

Персонал, работающий с данным оборудованием, не подвержен воздействию вредного УФ-излучения. Очистка воздуха возможна круглосуточно.

## Техническая спецификация

Лампы	3 x 30 Вт Уф-лампы
УФ-излучение	254 ( только внутри корпуса)
Эффективность очистки	98-95% от бактерий 96-93% от грибков
Мощность очистки	6,35 л/сек, 22,9 м³/час, 550 м³/сутки
Вентилятор	9Вт
Уровень шума	33/35 дБ(А)
Общая потребляемая мощность	110 Вт
Техобслуживание	Раз в год

	BT 90S CM/WM	BT 90S FM
Модель	потолочная/настенная	напольная (передвижная)
Код заказа	4253320	4253321
Монтаж	Настенная на стену, потолочная на потолок	Передвижная на колесах
Электроподключения	Кабель питания входит в поставку	Сетевой шнур входит в поставку
Колеса		5 колес, Ø 75 мм, из которых 2 с тормозом
Размеры	1400 x 300 x 150 мм	1700 x 660 x 630 мм
Вес	11 кг	24 кг
Упаковочные габариты	размеры 1500 x 350 x 170 мм	размеры: 1500 x 350 x 170 мм 670 x 670 x 150 мм 1650 x 300 x 150 мм
	брутто: 12 кг	брутто: 25 кг



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
АО ИДМАН  
Маттиланте 75  
ПЯ 4  
04601 МЯНТСЯЛЯ  
телю+358 19 68921

ПРОДАЖА:  
СISU МЕДИКАЛ  
ТИМОНТИЕ 7  
FIN-05400 ЕКЕЛА, ФИНЛЯНДИЯ  
Тел.+358 40 5304510  
Факс +358 9 4173153

**SISU**  
MEDICAL

sisu@sisumedical.com, www.sisumedical.com